



Gira anropssystem 834 Plus
Brukerhåndbok

Gira anropssystem 834 Plus
Bruksanvisning for sluttbrukere

GIRA

1.	Innledning	4
1.1	Generelle merknader	4
1.2	Bruksområder	5
2.	Funksjon.....	6
2.1	Funksjonsbeskrivelse.....	6
2.2	Anropsutløsning	8
2.3	Talemuligheter	9
2.4	Slå på lys	9
2.5	Test av pasienthåndsett.....	9
2.6	Markere tilstedeværelse og slå av anrop	10
2.7	Visning.....	11
2.8	Anropstyper og signalisering.....	12
2.9	Signalisere tilstedeværelse og slå av anrop.....	15
2.10	Anropenes prioritet.....	16
2.11	Betjening av kontorterminalen	17
2.12	Betjening av kontorterminalen CT9	20

1. Innledning

Gira anropssystem 834 Plus er et trådbundet anropssystem med talemulighet. Det oppfyller alle krav i standarden DIN VDE 0834.



OBS! Visningene og funksjonene er eksempler.

Visningene og funksjonene som beskrives i denne veiledningen, er eksempler, og kan variere avhengig av anleggskonfigurasjonen.

1.1 Generelle merknader

De tekniske dataene og spesifikasjonene i dette dokumentet kan endres uten forvarsel. Illustrasjonene er også uforbindtlige.

Det tas forbehold om tekniske endringer.



Merknad: Aktuell informasjon på Giras nettside.

Produktet du har kjøpt, er gjenstand for stadig videreutvikling og oppdatering. Det kan derfor hende at opplysningene i denne håndboken ikke lenger stemmer overens med de nyeste opplysningene.

Du finner oppdatert produktinformasjon på Giras nettside:

<http://www.gira.de>

Programvareoppdateringer og dokumentasjon for produktet finner du på

<http://www.download.gira.de>.

Ingen deler av denne dokumentasjonen får mangfoldiggjøres eller overføres uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG, uansett form og metode (elektronisk eller mekanisk).

Med enerett!

© by Gira, Giersiepen GmbH & Co. KG
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

1.2 Bruksområder

Gira anropssystem 834 Plus brukes til visning av nødsituasjoner og alarmering av personer.

Prinsipielt utgjøres et anropssystem av følgende elementer:

Elementer i et anropssystem	Apparater
Elementer som utløser anrop	Ringeknapper, pasienthåndsett og mobile ringeknapper i forskjellige utførelser og med forskjellige funksjoner, i tillegg til trekknapper og pneumatiske ringeknapper.
Elementer som viser anrop	Signallamper, korridordisplayer, rom-/kontorterminaler, kontorterminal CT9 og rommoduler i forskjellige utførelser og med forskjellige funksjoner.
Elementer som slår av anrop	Utkoblings- og tilstedeværelsesknapper i forskjellige utførelser og med forskjellige funksjoner.
Spenningsforsyningselementer	Nettlikeretter, med og uten USV.
Styrende og loggførende elementer	Stasjonssentral og systemstyresentral.

Tabell 1: Elementene i et anropssystem



Merknad: Ikke-forskriftsmessig bruk.

Gira frasier seg ethvert juridisk ansvar og garantiansvar ved feil og skader som oppstår på grunn av ikke-forskriftsmessig bruk og/eller ikke-forskriftsmessig installasjon av Gira anropssystem 834 Plus.

2. Funksjon

2.1 Funksjonsbeskrivelse

Anrop	Hvis en rød ringeknapp (pasienthåndsett/mobil ringeknapp, en trekkbryter eller en pneumatisk ringeknapp) aktiveres, utløses et anrop. Anropet vises av et beroligelseslys i ringeknappen (eller i huset til trekkknappen eller den pneumatiske ringeknappen), og signaliseres samtidig av det røde kontinuerlige lyset til et romsignallys.
WC-anrop	Hvis et anrop utløses fra et våtrom/toalett, indikeres dette såkalte WC-anropet av rødt og hvitt kontinuerlig lys i romsignallyset.
Anropsviderekobling	I alle rom der tilstedeværelsen er markert ved at den grønne eller gule tilstedeværelsesknappen er trykt, signaliseres et utløst anrop av en summer. Denne funksjonen kalles anropsviderekobling. Tilstedeværelsen vises av et grønt eller gult kontinuerlig lys i tilstedeværelsesknappen og i romsignallyset.
Nødanrop	Hvis den røde ringeknappen aktiveres ved markert tilstedeværelse, utløses et nødanrop. Nødanropet signaliseres ved at et romsignallys blinker rødt.
WC-nødanrop	Hvis et anrop utløses fra et våtrom/toalett ved markert tilstedeværelse, indikeres dette såkalte WC-anropet av rødt og hvitt kontinuerlig lys i romsignallyset.
Legeanrop	Når den blå legeanropsknappen trykkes, utløses et legeanrop. Dette signaliseres også ved at romsignallyset blinker rødt, men har høyere prioritet og høyere blinkfrekvens i romsignallyset enn et nødanrop.
Taleanrop	Hvis et anrop utløses av et apparat med talefunksjon, kan det opprettes taleforbindelse med pasienten ved at telefonrørsymbolet på rom- eller kontorterminalen trykkes.

Anropsvideresending

Anrop kan også viderekobles til en kontor-/romterminal eller en rommodul (anropsvideresending). (Nød)-anropet slås av med en AV-knapp eller med tilstedeværelsesknappen i rommet anropet ble utløst fra.


Fjernutkobling av et anrop er bare tillatt på forespørsel ved tale-anrop.

Loggføring

Ved igangkjøring av anlegget fastsettes alle nødvendige parametere, som for eksempel inndeling/sammenfatning av rommene i organisatoriske enheter, konfigurering av tjenester osv. i konfigurasjonsprogramvaren. Systemstyresentralen eller stasjonssentralen loggfører alle hendelser i anlegget, som for eksempel anrop og nødanrop, markering av tilstedeværelse og feil.

Et utløst anrop opprettholdes etter en spenningssvikt.

2.2 Anropsutløsning

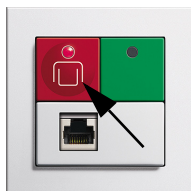


- **Et anrop utløses via den røde ringeknappen.**

De røde ringeknappene (også ved pasienthåndsett, mobil ringeknapp og trekknapp) er merket med et entydig symbol for at de skal være lettere å identifisere, og har også et finnellys/beroligelseslys i knappen (i huset).


- **Nødanrop utløses også ved bruk av de røde ringeknappene.**

Nødanropsfunksjonaliteten krever at tilstedeværelse på forhånd er markert med den grønne eller gule tilstedeværelsesknappen.

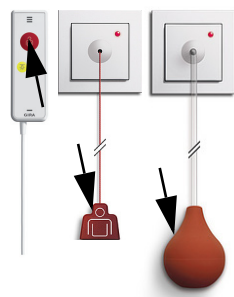

- **Andre enheter som utløser anrop**


Pasienthåndsett, mobil ringeknapp, trekknapp, pneumatisk ringeknapp.

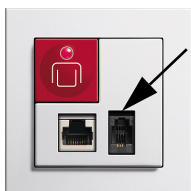

- **Diagnostikkanrop (monitoranrop)**

Anrop fra medisinsk utstyr i henhold til standard DIN EN 60601 (VDE 0750).

Diagnostikk-tilkoblingskabelen (bestillingsnr.: 2961 00) blir da koblet til.

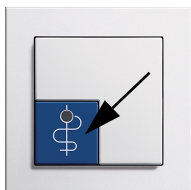


- **Et legeanrop utløses via den blå ringeknappen.**

Den blå ringeknappen har et entydig symbol som gjør den lettere å identifisere, og har et finnellys/beroligelseslys i knappen.


Legeanropsfunksjonaliteten krever at tilstedeværelse på forhånd er markert med den grønne eller gule tilstedeværelsesknappen.

2.3 Talemuligheter

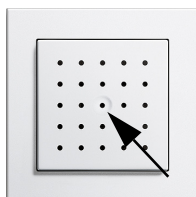

- **Håndfri**

Etter at et anrop/nødanrop er utløst via en ringeknapp, kan en taleforbindelse mellom stasjonsrommet/kontoret og pasienten opprettes. Talemodulen fungerer da både som høyttaler og mikrofon.

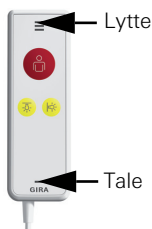


- **Diskret tale**

Hvis et anrop utløses av pasienthåndsettet ved at den røde ringeknappen trykkes, kan det opprettes taleforbindelse med pasienten fra rom- eller kontorterminalen (for eksempel i stasjonsrommet). Hvis pasienten deretter trykker en gang til på den røde ringeknappen på pasienthåndsettet, er såkalt diskret tale via pasienthåndsettet mulig. Pasienthåndsettet holdes da inntil øret som et telefonrør.

2.4 Slå på lys

- **Slå på romlys og leselys**

Romlyset (taklys) og/eller leselyset ved sengen slås på og av med den gule knappen.

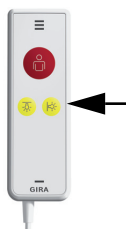

2.5 Test av pasienthåndsett


En test av utstyret er nødvendig i henhold til standard DIN VDE 0834 etter at pasienthåndsettet er koblet til en tilleggstikkontakt.

- **Lysdioden i den røde knappen til pasienthåndsettet blinker raskt**

Den røde ringeknappen på pasienthåndsettet må trykkes én gang når testen av pasienthåndsettet skal utføres. Hvis ikke testen utføres, blir et anrop utløst av systemet.

2.6 Markere tilstedeværelse og slå av anrop

Den grønne eller gule tilstedeværelsesknappen trykkes når man kommer inn i og forlater et rom.

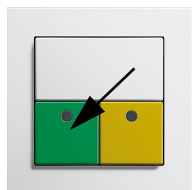


- **Markere tilstedeværelse 1 og slå av anrop**

Pleiepersonalets tilstedeværelse markeres ved at den grønne tilstedeværelsesknappen trykkes og signaliseres av grønt kontinuerlig lys i et romsignallys. Samtidig blir et ventende anrop slått av.

Unntak våtroms/WC-anrop: Dette anropet kan bare slås av med AV-knappen i våtrommet/på toalettet.

Tilstedeværelsen vises også på displayet til en kontor-/rom-terminal (hvis en slik finnes). Hvis pleiepersonale arbeider i forskjellige rom samtidig og tilstedeværelsen er angitt, viser displayet til kontor-/romterminalen tilstedeværelsene etter hverandre.

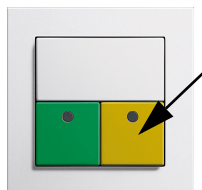

- **Markere tilstedeværelse 2 og slå av anrop**

Tilstedeværelsen til ytterligere én person fra pleiepersonalet markeres ved at den gule tilstedeværelsesknappen trykkes og signaliseres av gult kontinuerlig lys i et romsignallys.

Samtidig blir et ventende anrop slått av.

Unntak våtroms/WC-anrop: Dette anropet kan bare slås av med AV-knappen i våtrommet/på toalettet.

Tilstedeværelsen vises også på displayet til en kontor-/rom-terminal (hvis en slik finnes). Hvis pleiepersonale arbeider i forskjellige rom samtidig og tilstedeværelsen er angitt, viser displayet til kontor-/romterminalen tilstedeværelsene etter hverandre.

**Merknad:**

Mulig særtrekk ved anropsutkoblingen.

I forbindelse med ringe- og AV-knappen med tilleggstikkontakt (bestillingsnr. 5903..) er det bare mulig å slå av anropet ved pasientsengen.

2.7 Visning

Nødsituasjon(er) signaliseres av et rødt og/eller hvitt lys i romsignallysene og av summeren (anropsviderekobling). I tillegg vises anrop også på displayene til kontor-/romterminalene og/eller korridordisplayene.

Formen på tekstvisningen på kontor-/romterminalene og korridordisplayene avhenger av hvordan teksten er skrevet inn i systemstyresentralen og hvordan parameterne er konfigurert i systemstyresentralen.

Visning av pleiepersonalets tilstedeværelse signaliseres av grønt og gult lys i romsignallysene og utløses med de grønne eller gule knappene.

Anropstype	Anropstype og -sekvens			
	Visuell signalisering	Farge	Lydsignal	
(Normalt) anrop		Kontinuerlig lys	rødt	$t_{\text{på}} = 1$ sek, pause 5 ... 10 sek
Nødanrop/ diagnostikkanrop		Blinkende lys, lang intervall på/av à ca. 1,2 sek ...		Tonesekvens $t_{\text{på}}/t_{\text{av}} = 1,2$ sek
Legeanrop		Blinkende lys, kort intervall på/av à ca. 0,3 sek ...		Tonesekvens $t_{\text{på}}/t_{\text{av}} = 0,3$ sek
Anrop fra (WC) våtrom		Kontinuerlig lys	rødt og hvitt	$t_{\text{på}} = 1$ sek, pause 5 ... 10 sek
Nødanrop fra (WC) våtrom		Blinkende lys	rødt og hvitt	Tonesekvens $t_{\text{på}}/t_{\text{av}} = 1,2$ sek
Tilstedeværelse 1		Kontinuerlig lys	grønn	Uten
Tilstedeværelse 2		Kontinuerlig lys	gul	Uten
Signalisering ved feil		Kontinuerlig lys	rødt	Uten

Tabell 2: Oversikt over anropstypene


2.8 Anropstyper og signalisering

- **(Normalt) anrop**

Et anrop utløses av at en rød eller blå ringeknapp aktiveres. (Det normale) anropet vises av rødt beroligelseslys i ringeknappen og rødt kontinuerlig lys i romsignallyset (se tabell side 11).

En innretning for anropsutløsning er tilordnet hver seng, og den sengeliggende pasienten kan nå denne komfortabelt og sikkert.

Ringeknappen, den mobile ringeknappen og dekkelet til trekkbryteren eller den pneumatisk ringeknappen har en rød lysdiode, slik at de er lettere å finne i mørket.

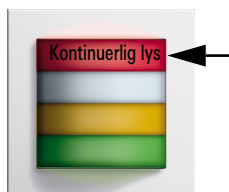


- **WC-anrop**

Anrop fra et våtrom eller separate toalettrom hhv. rom med badekar eller dusj.

WC-anropet vises av et hvitt kontinuerlig lys (i tillegg til det røde kontinuerlige lyset) i et romsignallys.


Slike anrop må slås av med utkoblingsknappen på det gjeldende stedet, med andre ord i våtrommet eller toalettrommet.

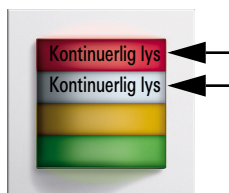

- **Nødanrop**

Når tilstedeværelsesmarkeringen slås på i et rom, forberedes nødanropsutløsingen. Ved ny aktivering av den røde ringeknappen i rommet utløses et nødanrop.


Nødanropet vises av rødt blinkende lys i et romsignallys (se tabell side 11).

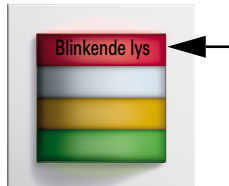

- **WC-nødanrop**

Når tilstedeværelsesmarkeringen slås på i et rom med WC-område, forberedes nødanropsutløsingen. Ved ny aktivering av en rød ringeknapp, en trekkknapp eller en pneumatisk ringeknapp i WC-/bad-området utløses et WC-nødanrop.

WC-nødanropet vises av rødt og hvitt blinkende lys i et romsignallys (se tabell side 11).

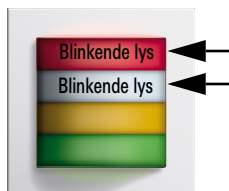




- **Diagnostikk-anrop**

Anrop fra medisinsk utstyr i henhold til standard DIN EN 60601 (VDE 0750).

Denne anropstypen betegnes også som monitoranrop, og anrop må skje via separate stikkontakter. Diagnostikkanrop er alarmanrop.

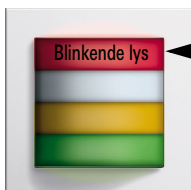

- **Alarmanrop/legeanrop**

Legeanrop kan utløses ved bruk av den blå legeanrops-knappen ved angitt tilstedeværelse 1 eller tilstedeværelse 2. Legeanrop er et anrop med eget signal (rask blinking).



- **Signalisering av uttrukket støpsel**

Hvis et pasienthåndsett eller en mobil ringeknapp bevisst eller ubevisst trekkes ut, viser romsignallyset et (normalt) anrop. Meldingen **Støpsel** vises på displayene til kontor- og romterminalene. Anropet kan bare slås av ved at den grønne (ikke gule) tilstedeværelses-/utkoblingsknappen trykkes i minst **3 sekunder**.



OBS: Kontroller funksjonaliteten.

Kontroller funksjonaliteten til pasienthåndsettet eller den mobile ringeknappen etter at støpselet er satt inn igjen.



- **Summersignal ved anropsviderekobling**

Funksjonen anropsviderekobling er aktivert i alle rom der tilstedeværelse er angitt.

Hvis et anrop eller nødanrop utløses i et annet rom (som hører til den samme organisatoriske enheten eller stasjonen), kan et summersignal høres i rommet med den angitte tilstedeværelsen. På displayet vises meldingen **Nødanrop romnummer**.




- **Signalisering ved feil**

Ved for eksempel ledningsbrudd i et rom vises meldingen **Feil rom XX**.



OBS: Kontakt servicetekniker.

Sørg for at en servicetekniker gjenoppretter anleggets funksjonalitet.

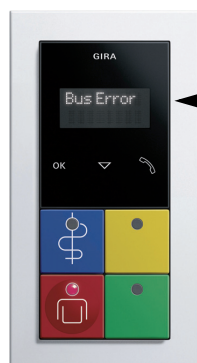

- **Signalisering av nødfunksjon**

Ved svikt på en styreenhet vises en melding på enheter med display.

Visning av meldingen **SSS-feil**: Systemstyresentralen har sviktet. Stasjonsovergrepene funksjoner (for eksempel tjenester eller sammenkoblinger) virker ikke lenger. Alle funksjoner innenfor stasjonen utføres fortsatt.

Visning av meldingen **Bussfeil**: Svikt ved stasjonssentralen. Alle enhetene til stasjonen er i nøddriftstilstand. Stasjonsovergrepene funksjoner (for eksempel tjenester eller sammenkoblinger) virker ikke lenger.



OBS: Kontakt servicetekniker.

Sørg for at en servicetekniker gjenoppretter anleggets funksjonalitet.



- **Signalisering med korridordisplay**

På korridordisplayet vises en melding i ren tekst med angivelse av romnummeret.

Hvis ingen anrop foreligger, viser korridordisplayet dato og klokkeslett.




Merknad: Tilstedeværelse vises ikke.

Tilstedeværelse vises ikke av korridordisplayet.

2.9 Signalisere tilstedeværelse og slå av anrop

Markering av tilstedeværelse signaliserer at pleiepersonale oppholder deg i rommet. Funksjonaliteten **nødanrop** og **anropsviderekoblingen** er aktivert når tilstedeværelse er angitt.

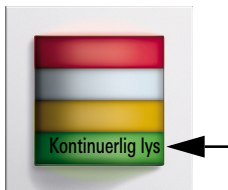


- **Signalisere tilstedeværelse 1 og slå av anrop**

Tilstedeværelsen til en person fra pleiepersonalet markeres ved at den grønne tilstedeværelsesknappen trykkes og signaliseres av grønt kontinuerlig lys i et romsignallys.

Anrop som foreligger, slås av ved at den grønne tilstedeværelsesknappen trykkes.

Unntak våtroms/WC-anrop: Dette anropet kan bare slås av med AV-knappen i våtrommet/på toalettet.

Tilstedeværelsen vises også på displayet til en kontor-/romterminal (hvis en slik finnes). Hvis pleiepersonale arbeider i forskjellige rom samtidig og tilstedeværelsen er angitt, viser displayet til kontor-/romterminalen tilstedeværelsene etter hverandre.

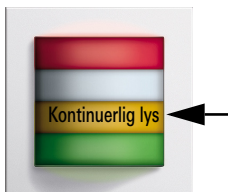

- **Signalisere tilstedeværelse 2 og slå av anrop**

Tilstedeværelsen til en person nummer to fra pleiepersonalet markeres ved at den gule tilstedeværelsesknappen trykkes og signaliseres av gult kontinuerlig lys i et romsignallys. Anrop som foreligger, slås av ved at den gule tilstedeværelsesknappen trykkes.

Unntak våtroms/WC-anrop: Dette anropet kan bare slås av med AV-knappen i våtrommet/på toalettet.

Tilstedeværelsen vises også på displayet til en kontor-/romterminal (hvis en slik finnes). Hvis pleiepersonale arbeider i forskjellige rom samtidig og tilstedeværelsen er angitt, viser displayet til kontor-/romterminalen tilstedeværelsene etter hverandre.

2.10 Anropenes prioritet

I visningen prioriterer anropssystemet alltid anropet med den høyeste prioriteten.

Hvis det foreligger anrop med samme prioritet, vises disse vekselvis på displayene.

Prioritet	Visningsenhet	Visning
Legeanrop	Romsignallys	Rødt blinkende lys, rask blinking
	Kontor-/romterminal	Tekst: Legeanr. rom XX
Diagnostikk-anrop	Romsignallys	Rødt kontinuerlig lys
	Kontor-/romterminal	Tekst: DIA rom XX
WC-nødanrop	Romsignallys	Rødt og hvitt blinkende lys, langsom blinking
	Kontor-/romterminal	Tekst: WC-nødanrop rom XX
Nødanrop	Romsignallys	Rødt blinkende lys, langsom blinking
	Kontor-/romterminal	Tekst: Nødanr. rom XX
WC-anrop	Romsignallys	Rødt og hvitt kontinuerlig lys,
	Kontor-/romterminal	Tekst: WC-anrop rom XX
Anrop	Romsignallys	Rødt kontinuerlig lys
	Kontor-/romterminal	Tekst: Anrop rom XX
Tilstedeværelse 1	Romsignallys	Grønt kontinuerlig lys
	Kontor-/romterminal	Tekst: TV 1 rom XX
Tilstedeværelse 2	Romsignallys	Gult kontinuerlig lys
	Kontor-/romterminal	Tekst: TV 2 rom XX

Tabell 3: Anropenes prioritet

2.11 Betjening av kontorterminalen

Sammenkoblinger kan aktiveres og deaktiveres med kontorterminalen. På den måten er det mulig å reagere på organisatoriske nødvendigheter.

Eksempel:

Nattevakt med sammenkobling av stasjoner.



Merknad:
Innstillinger i konfigurasjonsprogramvaren.

Hvilke rom som hører til én organisatorisk enhet (stasjon) og tekstvisningen på displayet fastsettes i systemstyresentralen.



- **Terminalens visnings- og betjeningselementer**

Display (1) for meldinger med to linjer.

Det kapasitive tastaturet (2) på den svarte glassflaten har tre symboler:

- OK, for å bekrefte/velge.
- Pil ned, åpne meny og navigering.
- Telefonrør, for mottak av taleanrop.

Den gjeldende handlingen utløses ved at av symbolene berøres med fingeren.



- **Motta og avslutte et taleanrop**

Et innkommende anrop vises på displayet og signaliseres eventuelt av et summersignal.

- Motta taleanrop

Telefonrørsymbolet på displayet må være synlig (utløses for eksempel av et anrop på en enhet med talefunksjon).

Berør knappen med telefonrørsymbolet med en finger. Kommunikasjon med anroperen opprettes.

- Avslutte taleanrop (sette anrop på vent)

Berør telefonrørsymbolet på nytt etter forespørsel om anropet, og anropet blir da aktivert igjen etter 5 minutter.

- Avslutte taleanrop (fjernutkoble anrop)

Avslutt anropet ved å berøre OK-symbolet.



- **Hente frem menyen til kontorterminalen**

Tilstedeværelse må være angitt.

Berør **pilsymbolet** med fingeren. Menyten åpnes (1. meny-punkt).

Hvis **pilsymbolet** berøres en gang til, vises det neste meny-punktet osv.

En menyoppføring velges/aktiveres/deaktiveres ved at **OK-symbolet** berøres.

Følgende meny-punkter kan velges (se også kontorterminalens menystruktur på side 19):

Fellesanrop: Til alle rommene. (Tale bare i én retning.)

Fellesanrop: Til alle rom med angitt tilstedeværelse. (Tale bare i én retning.)

Etter ca. tre sekunder uten inndata skifter displayet til den opprinnelige visningen.



- **Sammenkobling av flere organisatoriske enheter/stasjon(er)**

Bare sammenkoblinger av organisatoriske enheter som tidligere har blitt opprettet i systemstyresentralen vises.

Tilstedeværelse må være angitt.

Berør **pilsymbolet** med fingeren. Menyten åpnes (1. meny-punkt).

Hvis **pilsymbolet** berøres en gang til, vises det andre meny-punktet (sammenkoblinger).

Hovedmenyen **Sammenkobling** velges med **OK-symbolet**. Alle tilgjengelige sammenkoblinger inkludert status vises. Berør **pilsymbolet** for å veksle mellom sammenkoblingene.


Sammenkoblingen som skal endres, velges ved at **OK-symbolet** berøres.

Berør **pilsymbolet** for å endre status (**aktiv** eller **inaktiv**).

Berør **OK-symbolet** for å lagre innstillingene.

Etter ca. tre sekunder uten inndata skifter displayet til den opprinnelige visningen.

Se også menystrukturen til kontorterminalen på side 19.

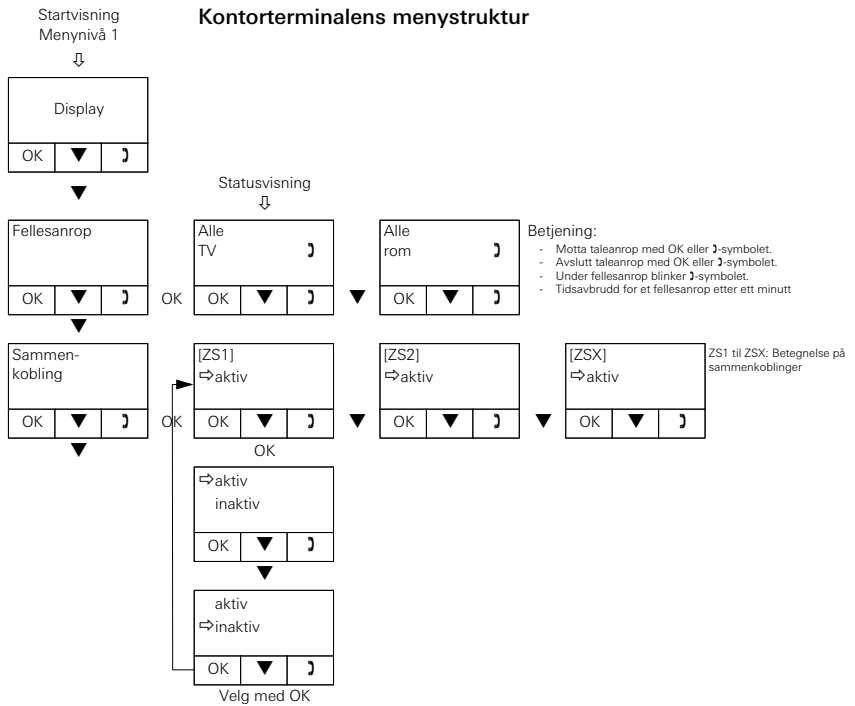

2.12 Betjening av kontorterminalen CT9

Når kontorterminalen CT9 er startet, vises startskjermbildet.



Berøringsskjerm-grensesnitt

Berør ikonene med fingeren.

Områder på startskjermbildet:

- (1) Statuslinje. Viser dato og klokkeslett.
- (2) Venstre skjermbildeområde. Informerer om sammenkoblinger og tilstedeværelse i de tilordnede organisatoriske enhetene (registeret **Informasjon**) eller viser en meny for valg av forskjellige funksjoner (registeret **Funksjoner**).
- (3) Høyre skjermbildeområde. Liste som viser hendelser i de tilordnede organisatoriske enhetene som det må reageres på. Den viste teksten avhenger av parametringen i konfigurasjonsveiviseren til systemstyresentralen eller stasjonssentralen.
- (4) Anropselementene til en kontorterminal. Anropselementene fungerer som knappene på en kontorterminal. Disse knappene finnes på skjermen: tilstedeværelse 1 (grønn), tilstedeværelse 2 (gul), anrop (rød) og legeanrop (blå).

- **Fellesanrop**

Viser en liste med mulige fellesanrop. Et trykk på det gjeldende fellesanropet utløser anropet direkte.

Fellesanrop er taleforbindelser som opprettes samtidig med flere deltakere i en organisatorisk enhet. Konfigurasjonen av organisatoriske enheter skjer i konfigurasjonsveiviseren til systemstyresentralen eller stasjonssentralen.

- **Romanrop**

Viser en liste med rom i organisatoriske enheter (for eksempel stasjoner) som kan anropes. Et trykk på det gjeldende romanropet utløser anropet direkte.

Romanrop er taleforbindelser som opprettes med ett enkelt rom. I samsvar med organisasjonsstrukturen kan rommene velges ved at den tilhørende stasjonen velges.

Romanrop er "lytteanrop": De kan ikke besvares. Det er bare mulig å svare hvis ringeknappen aktiveres ved oppringing for eksempel fra pleiepersonalet.

- **Sammenkoblinger**

Viser en liste med sammenkoblede organisatoriske enheter. Sammenkoblingene stilles inn på forhånd i konfigurasjonsveiviseren til systemstyresentralen eller stasjonssentralen, og blir aktivert i kontorterminalen CT9 ved behov.

- **Stasjonslogg**

Viser en liste med alle hendelser i løpet av den gjeldende dagen.

- **Hurtigvalg 1**

Brukes for å hoppe direkte til en side. Knappen konfigureres i ekspertmodus.

- **Hurtigvalg 2**

Brukes for å hoppe direkte til en side. Knappen konfigureres i ekspertmodus.

- **Rengjøringsfunksjon**

Låser skjermen i en bestemt tid. Tidsrommet bestemmes i ekspertmodus.

- **Innstillinger**

- **Lydstyrkeinnstillinger**

- Brukes for å stille inn lydstyrken til enheten (lydsignaler og samtaler).

- **Lysstyrke**

- Brukes for å stille inn lysstyrken på skjermen.

- **Ekspertmodus**

- Gir grunnleggende innstillingsmuligheter for kontorterminalen CT9.

- Kontakt systemadministratoren eller en elektriker hvis det skal foretas endringer på dette området.

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Elektro-installasjons-
systemer

Industriegebiet Mermbach
Dahlienstraße
42477 Radevormwald

P.O. Box 12 20
42461 Radevormwald

Tyskland

Tlf. +49 (0) 2195 - 602-0
Faks +49 (0) 2195 - 602-191

www.gira.com
info@gira.com

GIRA

Installasjonsfirmaets navn og adresse:

Servicetelefon: _____